


BT-474 细胞说明书

货号: **NCL-10175**

规格: $>5 \times 10^5$ cells/T25 培养瓶 (冻存管)

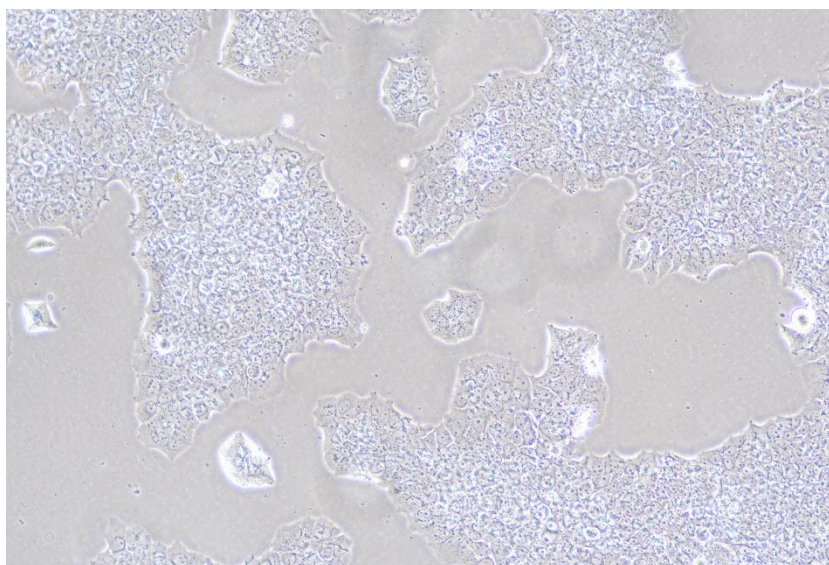

细胞名称	人乳腺导管癌细胞
细胞别称	BT-474; Bt-474; BT474
种属来源	人
组织来源	乳腺浸润性导管癌
细胞形态及生长特性	上皮细胞样、贴壁生长
培养方案	培养体系: RPMI-1640 + 20% FBS (C8500) + 1% P/S (C100C5) + 10 μ g/ml Insulin + 2mM L-glutamine 推荐使用新赛美配套专用完全培养基 培养条件: 37 $^{\circ}$ C 5% CO ₂
消化	0.25%胰蛋白酶-EDTA 消化液 (C100C1)
传代比例	1: 2 - 1: 4, 换液 2-3 次/周
冻存条件	常规方案: 60%基础培养基+30%FBS+10%DMSO 液氮保存 推荐方案: 使用新赛美无血清细胞冻存液 (货号: C40050) -80 $^{\circ}$ C或液氮保存
生物安全等级	1 级
用途	仅供科研使用
注意事项	详见收货指南

