


MIA-PaCa-2 细胞说明书

货号: **NCL-10146**

规格: $>5 \times 10^5$ cells/T25 培养瓶 (冻存管)

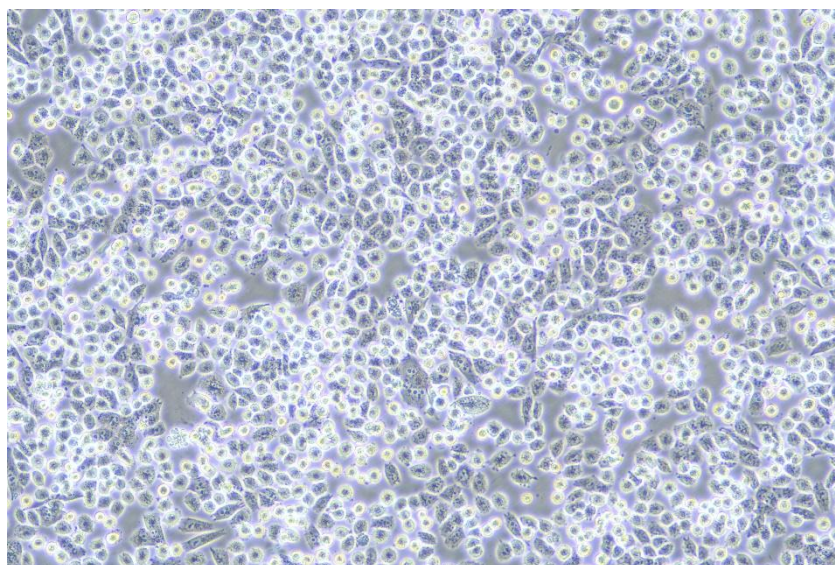

细胞名称	人胰腺癌细胞
细胞别称	MIA-PaCa-2; MIA-PACA-2; MIA-Pa-Ca-2; MIA Paca2; MIA PaCa2; MiaPaCa-2; MIAPACA-2; MiaPaca.2; MiaPaCa2; Miapaca2; MIAPaCa2; MIAPACA2; Mia PACA 2; MIAPaCa-2; PaCa2
种属来源	人
组织来源	胰腺
细胞形态及生长特性	上皮细胞样、贴壁生长伴，有圆形漂浮细胞
培养方案	培养体系: DMEM + 10% FBS (C8500) + 2.5% HS + 1% P/S (C100C5) 推荐使用新赛美配套专用完全培养基 培养条件: 37°C 5% CO ₂
消化	0.25%胰蛋白酶-EDTA 消化液 (C100C1)
传代比例	1: 3 - 1: 8, 换液 2-3 次/周
冻存条件	常规方案: 60%基础培养基+30%FBS+10%DMSO 液氮保存 推荐方案: 使用新赛美无血清细胞冻存液 (货号: C40050) -80°C或液氮保存
生物安全等级	1 级
用途	仅供科研使用
注意事项	—————

