


SK-MEL-5 细胞说明书

货号: **NCL-10128**

规格: $>5 \times 10^5$ cells/T25 培养瓶 (冻存管)

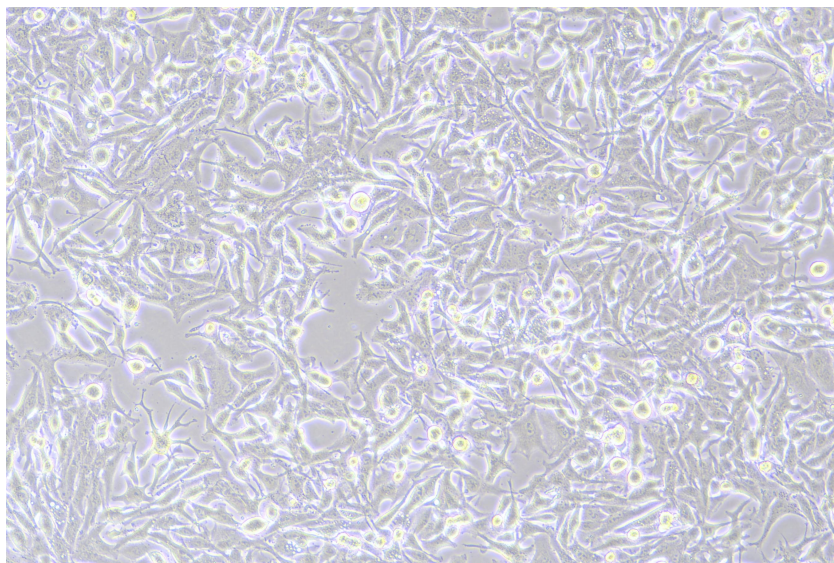

细胞名称	SK-MEL-5 人皮肤黑色素瘤细胞
细胞别称	SK-MEL-5;SK-Mel-5; SK MEL 5; SK.MEL.5; SK-MEL5; SKMel-5; SKMEL-5; SKMEL5; SKMel5; SKmel5; AA-Mel
种属来源	人
组织来源	皮肤
细胞形态及生长特性	星形; 成纤维细胞样; 贴壁细胞
培养方案	培养体系: MEM(含 NEAA) + 10% FBS (C8500) + 1% P/S (C100C5) 推荐使用新赛美配套专用完全培养基 培养条件: 37℃ 5% CO ₂
消化	0.25%胰蛋白酶-EDTA 消化液 (C100C1)
传代比例	1: 2 - 1: 3, 换液 2-3 次/周
冻存条件	常规方案: 60%基础培养基+30%FBS+10%DMSO 液氮保存 推荐方案: 使用新赛美无血清细胞冻存液 (货号: C40050) -80℃或液氮保存
生物安全等级	1 级
用途	仅供科研使用
注意事项	

