


RAW264.7 细胞说明书

货号: NCL10179

规格: $>5 \times 10^5$ cells/T25 培养瓶 (冻存管)

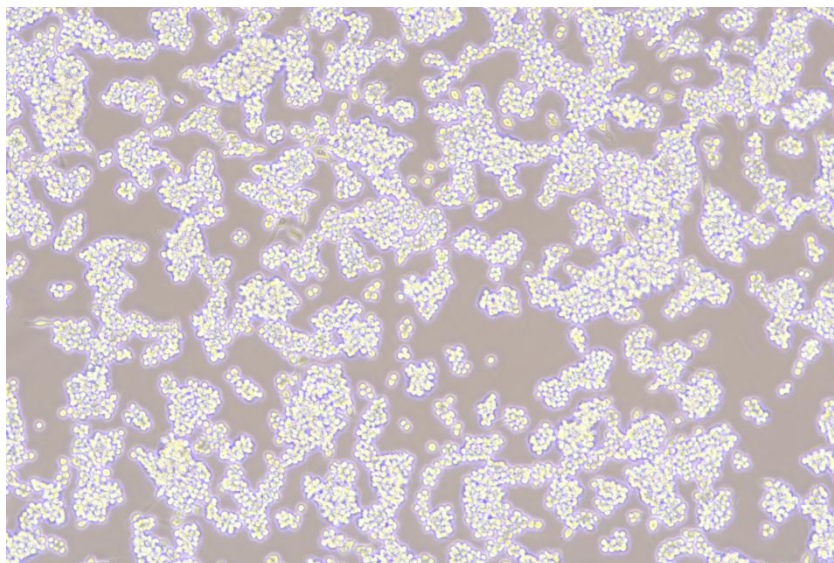

细胞名称	小鼠单核巨噬细胞白血病细胞
细胞别称	RAW264; RAW2647; RAW264.7; RAW-264.7; Raw 264.7; Raw264..7
种属来源	小鼠
组织来源	单核细胞; 巨噬细胞
细胞形态及生长特性	不规则圆形、贴壁生长
培养方案	培养体系: DMEM + 10% FBS (C8500) + 1% P/S (C100C5) 推荐使用新赛美配套专用完全培养基 培养条件: 37℃ 5% CO ₂
传代步骤	该细胞不建议使用胰酶消化, 可以直接吹打使之悬浮或者使用细胞刮。
传代比例	1: 2 - 1: 8, 换液 2-3 次/周
冻存条件	常规方案: 60%基础培养基+30%FBS+10%DMSO 液氮保存 推荐方案: 使用新赛美无血清细胞冻存液 (货号: C40050) -80℃或液氮保存
生物安全等级	1 级
用途	仅供科研使用
注意事项	详见收货指南

