


SCC-9 细胞说明书

货号: **NCL-10167**

规格: $>5 \times 10^5$ cells/T25 培养瓶 (冻存管)

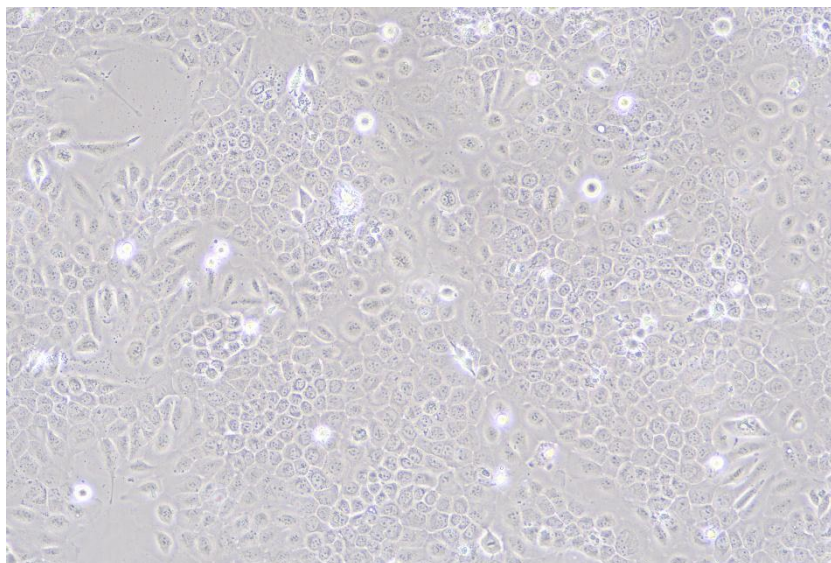

细胞名称	人舌鳞癌细胞
细胞别称	SCC-9; SCC 9; SCC9
种属来源	人
组织来源	舌
细胞形态及生长特性	上皮细胞样、贴壁生长
培养方案	培养体系: DMEM/F12 + 10% FBS (C8500) + 1% P/S (C100C5) + 400ng/mL Hydrocortisone 推荐使用新赛美配套专用完全培养基 培养条件: 37°C 5% CO ₂
消化	0.25%胰蛋白酶-EDTA 消化液 (C100C1)
传代比例	1: 2 - 1: 4, 换液 2-3 次/周
冻存条件	常规方案: 60%基础培养基+30%FBS+10%DMSO 液氮保存 推荐方案: 使用新赛美无血清细胞冻存液 (货号: C40050) -80°C或液氮保存
生物安全等级	1 级
用途	仅供科研使用



注意事项	该细胞较难消化，注意延长消化时间，使用 0.25%含 EDTA 的胰酶消化到细胞收缩变圆，大概 1/3 的细胞漂浮时，可终止消化；通常需要 15-20 min。
------	--

