


SU-DHL-1 细胞说明书

货号: NCL-20029 规格: $>5 \times 10^5$ cells/T25 培养瓶 (冻存管)



细胞名称	人间变性大细胞淋巴瘤细胞
细胞别称	SU-DHL1;SUDHL1;SUDHL-1;SuDHL-1;SuDHL 1; Stanford University-Diffuse Histiocytic Lymphoma-1
种属来源	人
组织来源	淋巴结
细胞形态及生长特性	淋巴母细胞样，悬浮生长
培养方案	培养体系: RPMI-1640 + 10% FBS (C9500) + 1% P/S (C100C5) 推荐使用新赛美配套专用完全培养基 培养条件: 37℃ 5% CO ₂
传代比例	1:2-1:6; 换液 2-3 次/周
冻存条件	常规方案: 60%基础培养基+30%FBS+10%DMSO 液氮保存 推荐方案: 使用新赛美无血清细胞冻存液 (货号: C40050) -80℃或液氮保存
生物安全等级	1 级
用途	仅用于科学研究
注意事项	1.该细胞为悬浮细胞，请注意离心收集细胞悬液。请勿直接倒掉细胞培养液。 2. 细胞形态不均一。

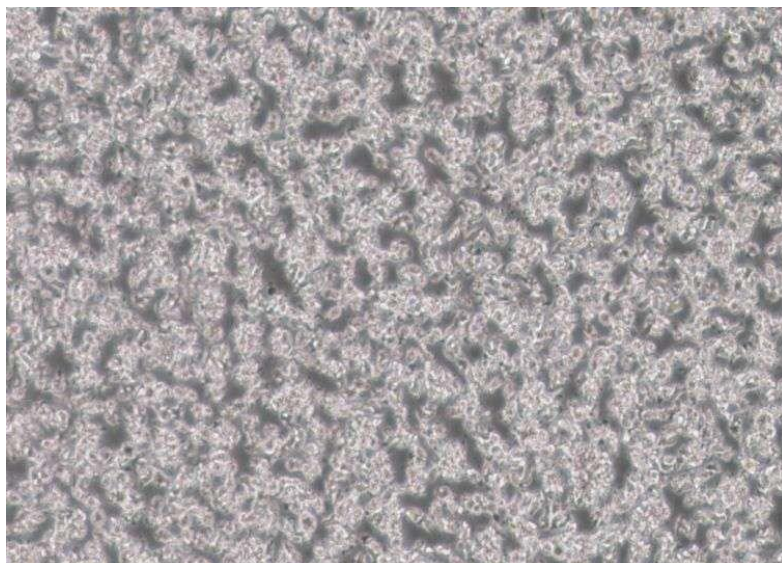