


KG-1 细胞说明书

货号: NCL-20034 规格: $>5 \times 10^5$ cells/T25 培养瓶 (冻存管)



细胞名称	人急性骨髓性白血病细胞
细胞别称	kg-1; KG1
种属来源	人
组织来源	转化细胞系
细胞形态及生长特性	原粒细胞样, 悬浮生长
培养方案	培养体系: IMDM + 20% FBS (C9500) + 1% P/S (C100C5) 推荐使用新赛美配套专用完全培养基 培养条件: 37℃ 5% CO ₂
传代比例	1:2-1:3; 换液 2-3 次/周
冻存条件	常规方案: 60%基础培养基+30%FBS+10%DMSO 液氮保存 推荐方案: 使用新赛美无血清细胞冻存液 (货号: C40050) -80℃或液氮保存
生物安全等级	1 级
用途	仅用于科学研究
注意事项	该细胞为悬浮细胞, 请注意离心收集细胞悬液。 请勿直接倒掉细胞培养液。

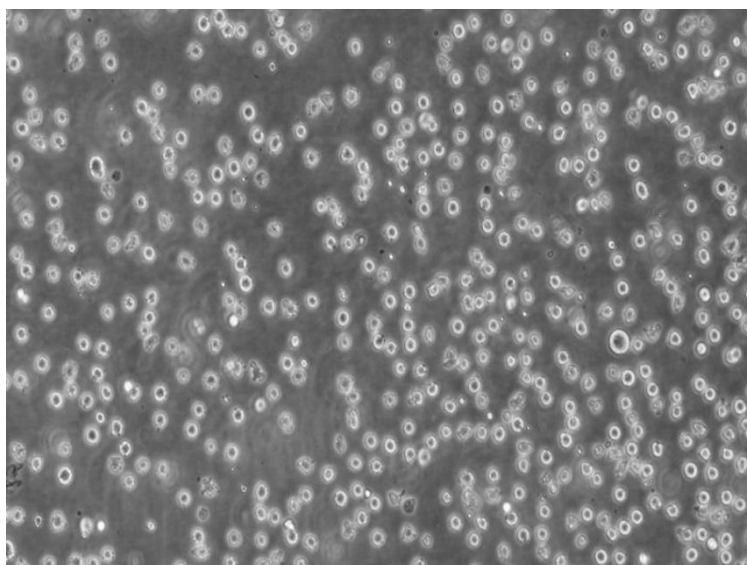