


## L5178Y TK+/- clone (3.7.2C)细胞说明书

货号: NCL-20031 规格:  $>5 \times 10^5$  cells/T25 培养瓶 (冻存管)



|           |                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 细胞名称      | 小鼠淋巴瘤细胞                                                                                               |
| 细胞别称      | L5178Y TK+/-3.7.2c; TK+/- (clone 3.7.2C)                                                              |
| 种属来源      | DBA/2 小鼠                                                                                              |
| 组织来源      | 淋巴瘤                                                                                                   |
| 细胞形态及生长特性 | 淋巴母细胞样、悬浮生长                                                                                           |
| 培养方案      | 培养体系:<br>DMEM + 10% FBS (C9500) + 1% P/S (C100C5)<br>推荐使用新赛美配套专用完全培养基<br>培养条件: 37℃ 5% CO <sub>2</sub> |
| 传代比例      | $3 \times 10^5$ - $1 \times 10^6$ cells/mL, 换液 2-3 次/周                                                |
| 冻存条件      | 常规方案:<br>60%基础培养基+30%FBS+10%DMSO 液氮保存<br>推荐方案:<br>使用新赛美无血清细胞冻存液 (货号: C40050)<br>-80℃或液氮保存             |
| 生物安全等级    | 1 级                                                                                                   |
| 用途        | 仅供科研使用                                                                                                |
| 注意事项      | 该细胞为悬浮细胞, 请注意离心收集细胞悬液。<br>请勿直接倒掉细胞培养液。                                                                |

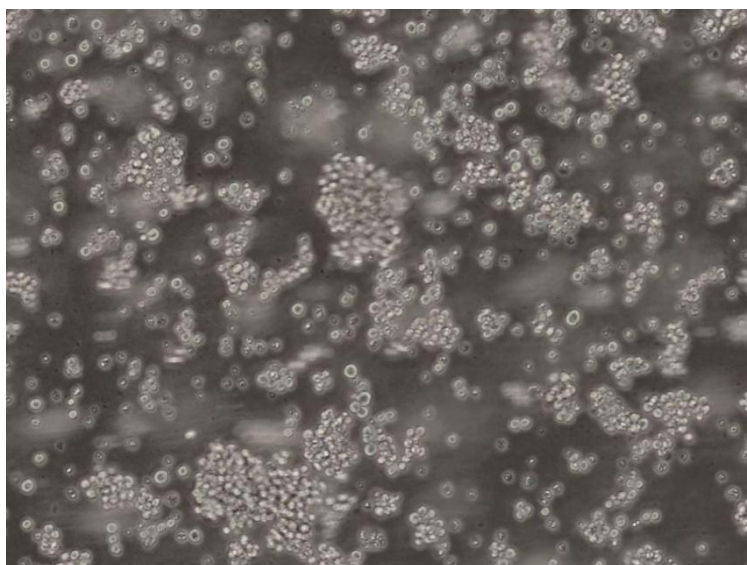