


## HuH-7 细胞说明书

货号: **NCL-10229**

规格:  $>5 \times 10^5$  cells/T25 培养瓶 (冻存管)

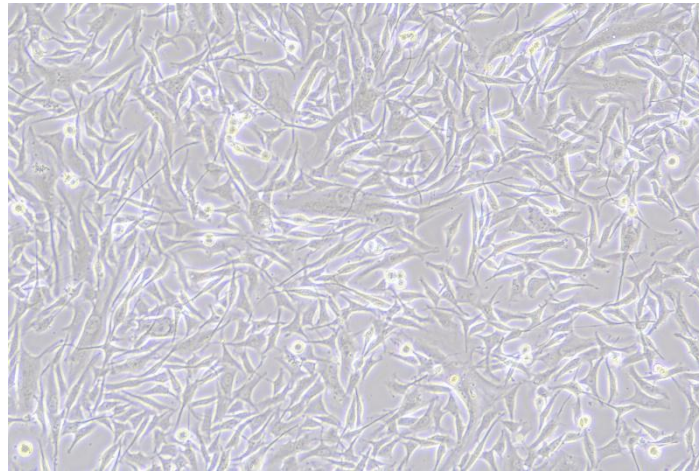

细胞名称	HuH-7 (人肝癌细胞)
细胞别称	HUH7; HUH-7;HuH7;Huh7;JTC-39; Japanese Tissue Culture-39
种属来源	人
组织来源	57 岁日本男性肝细胞癌患者的肿瘤组织
细胞形态及生长特性	上皮细胞样、贴壁生长
培养方案	培养体系: DMEM (C500C4) + 10% FBS (C9500) + 1% P/S (C100C5) 推荐使用新赛美配套专用完全培养基 培养条件: 37°C 5% CO <sub>2</sub>
消化	0.25%胰蛋白酶-EDTA 消化液 (C100C1)
传代比例	1: 3 - 1: 6, 换液 2-3 次/周
冻存条件	常规方案: 60%基础培养基+30%FBS+10%DMSO 液氮保存 推荐方案: 使用新赛美无血清细胞冻存液 (货号: C40050) -80°C或液氮保存
生物安全等级	2 级
用途	仅供科研使用
注意事项	贴壁依赖性生长, 易形成细胞团块

