


T2 细胞说明书

货号: **NCL20044**

规格: $>5 \times 10^5$ cells/T25 培养瓶 (冻存管)

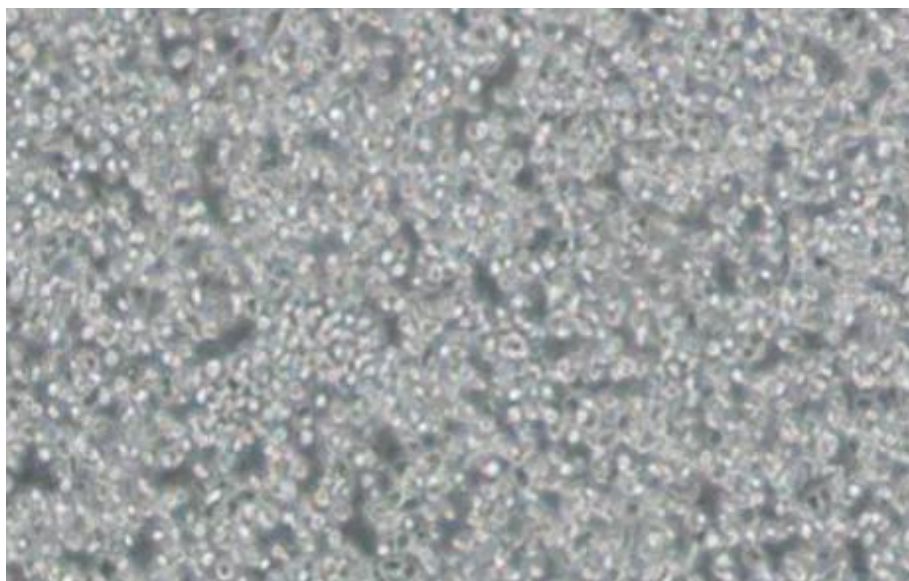

细胞名称	T2 (人淋巴母细胞)
细胞别称	T2 (174 x CEM.T2);T2(174 x CEM.T2);174xCEM.T2;CEMx721.174.T2
种属来源	人
组织来源	淋巴液
细胞形态及生长特性	单个或成簇悬浮生长的圆形至多形性细胞样、悬浮生长
培养方案	培养体系: RPMI-1640 (C500C5) + 10% FBS (C9500) + 1% P/S (C100C5) 推荐使用新赛美配套专用完全培养基 培养条件: 37°C 5% CO ₂
传代比例	$3-5 \times 10^5$ cells/mL, 换液 2-3 次/周
冻存条件	常规方案: 60%基础培养基+30%FBS+10%DMSO 液氮保存 推荐方案: 使用新赛美无血清细胞冻存液 (货号: C40050) -80°C或液氮保存
生物安全等级	1 级
用途	仅供科研使用
注意事项	

