


NCI-H1048 细胞说明书

货号: NCL10259

规格: $>5 \times 10^5$ cells/T25 培养瓶 (冻存管)

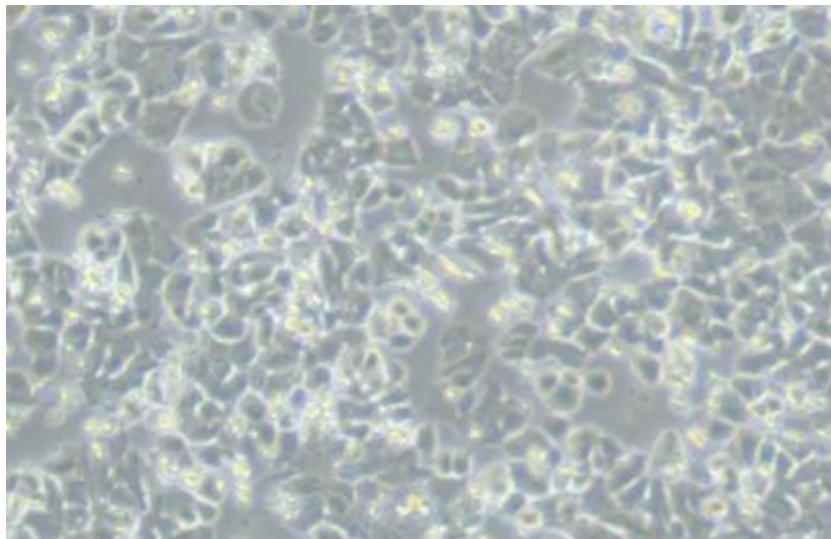

细胞名称	NCI-H1048 (人小细胞肺癌细胞)
细胞别称	H1048;H-1048;NCIH1048
种属来源	人
组织来源	肺; 转移部位: 胸腔积液
细胞形态及生长特性	上皮细胞样(卵圆形、多角形或不规则型)、贴壁生长
培养方案	培养体系: DMEM/F12 + 5% FBS (C9500) + 1% P/S (C100C5) +0.5% ITS-G +10 nM Hydrocortisone +10 nM beta-estradiol 推荐使用新赛美配套专用完全培养基 培养条件: 37°C 5% CO ₂
消化	0.25%胰蛋白酶-EDTA 消化液 (C100C1)
传代比例	1: 2 - 1: 4, 换液 2-3 次/周
冻存条件	常规方案: 60%基础培养基+30%FBS+10%DMSO 液氮保存 推荐方案: 使用新赛美无血清细胞冻存液 (货号: C40050) -80°C或液氮保存
生物安全等级	1 级
用途	仅供科研使用
注意事项	—————

